

Schulterarthroskopie
Struma
Kieferchirurgie
Gesichtschirurgie
Karotis
Neurochirurgie

SAMARIT
improving patient care



Beach-Chair – Lagerung heute.

- Erleichterte Intubation in Rücken- oder leichter Beach-Chair – Lagerung.
- Durch Veränderung des Luftdruckes am Kopf- oder Halskissen kann der Patient anatomisch gelagert werden.
- Die BEACH-CHAIR+ Schiene schützt die Wirbelsäule bei ungewolltem Wegfall der Kopfkalotte und verhindert einen Metallkontakt zu derselben.
- Vereinfacht und verkürzt die Lagerung sowie den Zeitaufwand.
- Patienten haben postoperativ weniger Beschwerden im Hals- und Nackenbereich.




NEW


«**BEACH-CHAIR⁺**» – die OP-Schiene Sicher besser.

Die sichere Lagerung im OP.

Die BEACH-CHAIR+ Schiene wurde zur Unterstützung des Anästhesie-Personals bei der Intubation konzipiert. Eine bequeme und sichere Lagerung des Patienten und Zeiteinsparung für das Lagerungspersonal werden erreicht.

Die BEACH-CHAIR+ Schiene wurde mit der praktischen Erfahrung eines Spezialisten zusammen mit Samarit Medical AG entwickelt.

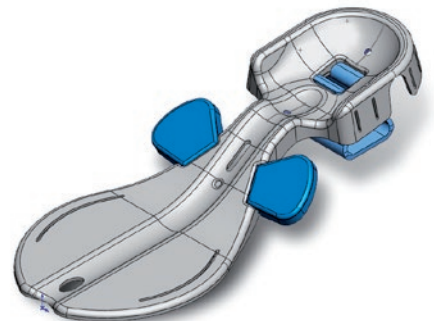

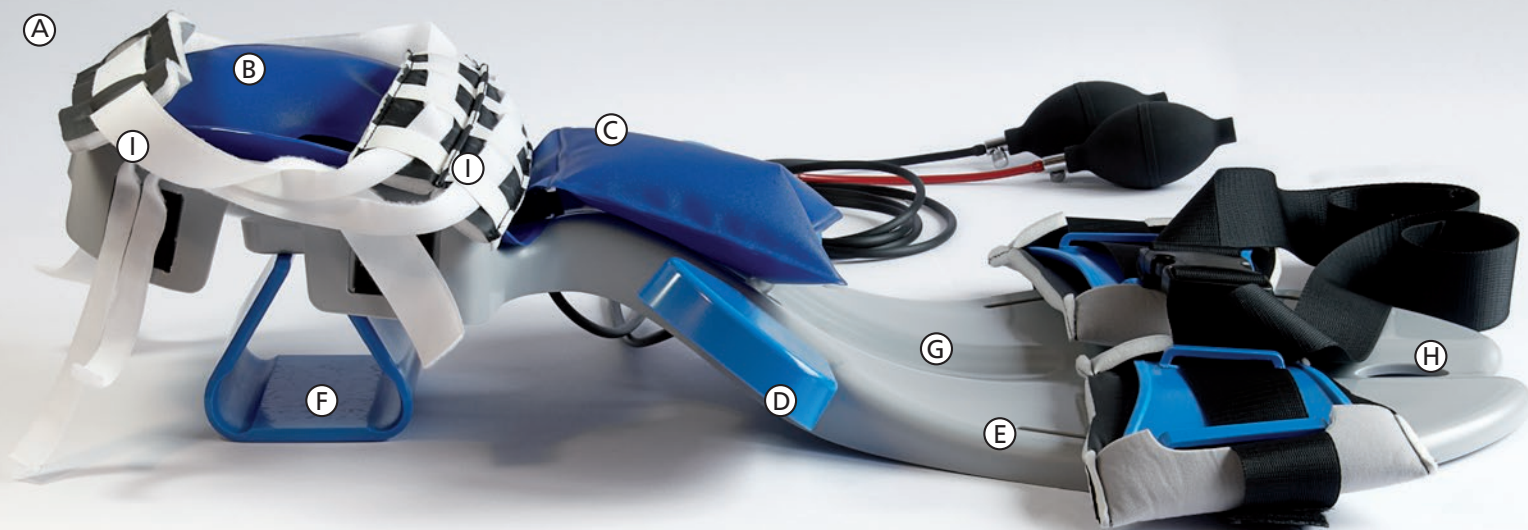

Einfach in der Anwendung.

Legende

- A. BEACH-CHAIR+ Schiene
- B. Aufblasbares Kissen für Kopf (Schlauch schwarz)
- C. Aufblasbares Kissen für Hals (Schlauch rot)
- D. Abnehmbare Flügel beidseits
- E. Thoraxplatten mit Gurten
- F. Abstützblock für Kopfschale
- G. Vertiefung für Wirbelsäule
- H. Loch zum Aufhängen der BC-Schiene
- I. Bänder mit Einmaleinsatz für die Kinn- und Stirnfixation Gleitsack (nicht abgebildet)

Die BC-Schiene besteht aus **Spezial-Kunststoff**, ist röntgendurchlässig, ohne Metall und beinhaltet kein Latex.

Die BC-Schiene verfügt über zwei **schulterunterstützende Flügel** die bei Bedarf entfernt werden können.

Zwei **aufblasbare Kissen** lagern Hals und Kopf des Patienten. Dieser wird mittels zweier Bänder fixiert.

Beim Einsatz der BC-Schiene auf einem **normalen OP-Tisch** wird die Kopfschale mit dem «Abstützblock» in der Höhe gesichert.

Beidseitig verstellbare Gurten-bänder



Zwei **Thorax-Platten** kombiniert mit sicheren Gurten erhöhen die Stabilität des Thorax.

Bänder für Kinn- und Stirnfixation



Verstellbare Flügel für offene und geschlossene Schulter – OP's



Abstützblock für den Einsatz auf üblichen OP-Tischen



Die BC-Schiene kann auch für Operationen ohne Beach-Chair – Lagerung verwendet werden, z.B. bei:

- Struma
- Kieferchirurgie
- Gesichtschirurgie
- Karotis
- evtl. Neurochirurgie





Vielseitig einsetzbar.

Die Probleme sind bekannt – nun haben wir die Lösung.



Früher, nur mit Kopfkalotte



Heute, mit BEACH-CHAIR+ Schiene



Die Lösung

Das Problem für die Patientin und für den Patienten:

Einmal in Narkose, erschlafft die Muskulatur, die Halswirbelsäule hängt durch. Die Kopfkalotte erzeugt Druckstellen am Hinterkopf und der Metallkontakt am Rücken birgt ein hohes Verbrennungsrisiko.

Nach länger dauernden Operationen beklagen sich Patienten häufig über schwere Hals- / Nacken- und Kopfschmerzen. Dies ist oftmals die Folge der unbequemen Lagerung respektive der fehlenden Hals- / Nackenunterstützung.



Die BC-Schiene bietet Sicherheit gegen Metallkontakt, verbessert die Lagerung und verhindert Druckstellen am Hinterkopf.

Die BC-Schiene wurde im besonderen für die Kopfkalotte entwickelt. Es ist auch ein Modell für die Verwendung mit «Helm» geplant.

Die BEACH-CHAIR+ Schiene löst für die OP-Crew die bekannten Lagerungsprobleme.

Die BEACH-CHAIR+ Schiene schliesst die Lücke zwischen Operationstisch und Kopfkalotte, und vermeidet unnötige Risiken.

BEACH-CHAIR+ Schiene, die geniale Erfindung ist vielseitig einsetzbar, einfach in der Anwendung, sicher für die Operateure und Anästhesisten und komfortabel für die Patienten.

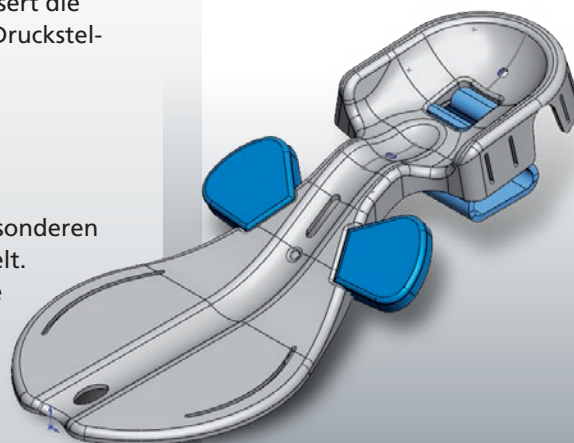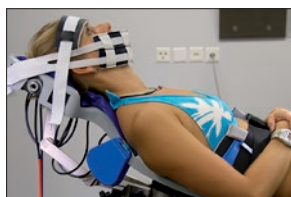

Haftpflichtfälle sind für ein Spital nicht bloss ein finanzielles Problem.

Ganz klar, ist die Lücke der Beach Chair – Lagerung ein Problem. Ob es zu einem Zwischenfall bei der Intubation oder infolge unsachgemässer Lagerung kommt. Solche Zwischenfälle belasten das Image eines Spitals schwer, oft mit Folgen. Das kann und will sich kein Spital leisten.

Verbrauchsmaterial

Set-Inhalt (Einwegprodukte)

① Stirnpolster, ② Kinnpolster, ③ 2 Thoraxpolster, ④ Velcrofixierband je 2 Stk. für Stirn- und Kinnpolster (zum mehrfachen Gebrauch), Gleitsack (PE)

Karton zu 10 Stk.

Model No. 420.0010

Karton zu 50 Stk.

Model No. 420.0050

Karton zu 100 Stk.


Model No. 420.0100

Lagerungskissen


Model No. 420.2040

Gesichtsschutz (Option)


Model No. 420.2020

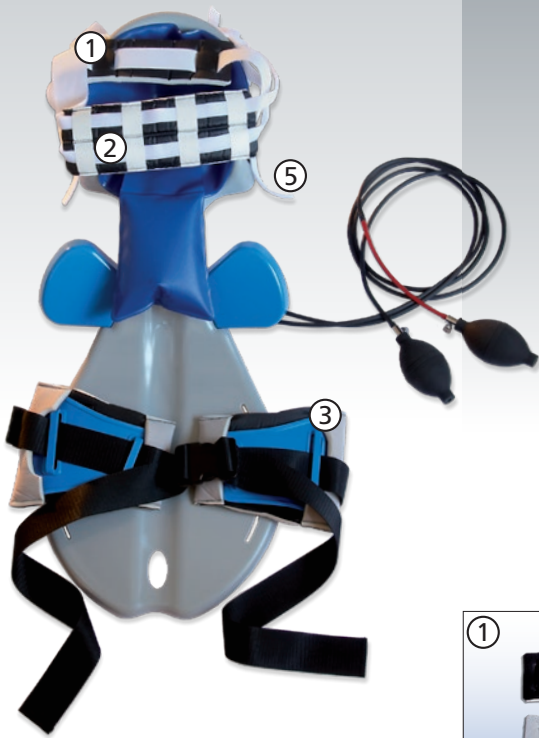

BEACH-CHAIR+ Schiene
(inkl. 5 Sets Verbrauchsmaterial)
Model No. 420.2000

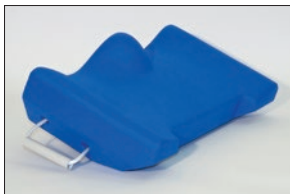

BC-Antirutschkissen
Model No. 420.2040

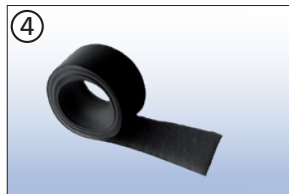

Lagerungskissen



Gesichtsschutz (Option)

www.samarit.com

Verlangen Sie auch die separaten Broschüren weiterer Produkte von Samarit!



Two point fixation



Rollbord™



Blue Transfer Board



TRANSGLIDE

Laden Sie Produktbroschüren in Ihrer Sprache von unserer Website herunter oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

SAMARIT
improving patient care

Samarit Medical AG

Gewerbestrasse 12

CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com