

Arthroscopie de l'épaule
Goitre
Chirurgie bucco-maxillaire
Chirurgie faciale
Carotide
Neurochirurgie

SAMARIT
improving patient care



Avant, avec calotte uniquement

Aujourd'hui la position n'est plus un problème avec Beach-Chair.

- Elle facilite l'intubation des patients en décubitus dorsal ou avec la tête légèrement relevée.
- Les coussins pour la tête et la nuque peuvent être gonflés ou dégonflés pour permettre le positionnement du patient en fonction de son anatomie.
- La gouttière BEACH-CHAIR+ protège la colonne vertébrale en cas de chute de la calotte et empêche un contact direct avec sa partie métallique.
- Elle simplifie la mise en place du patient et réduit le temps nécessaire à son installation.
- Elle réduit les douleurs post-opératoires des patients au niveau du cou et de la nuque.




NEW


«**BEACH-CHAIR⁺**» – la gouttière pour bloc opératoire. Pour plus de sécurité.

La sécurité du positionnement au bloc opératoire.

La gouttière BEACH-CHAIR+ a été conçue pour faciliter le travail de l'anesthésiste lors de l'intubation. Elle permet un positionnement confortable et sûr du patient avec un gain de temps appréciable pour le personnel soignant.

La gouttière BEACH-CHAIR+ a été conçue grâce à l'expérience pratique de W. Albrecht en collaboration avec Samarit Medical AG.

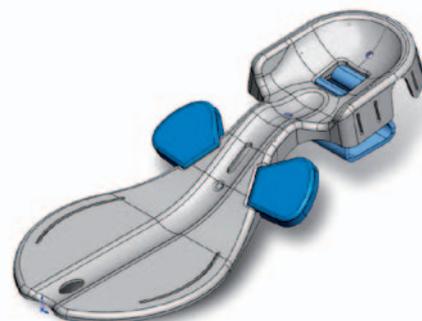

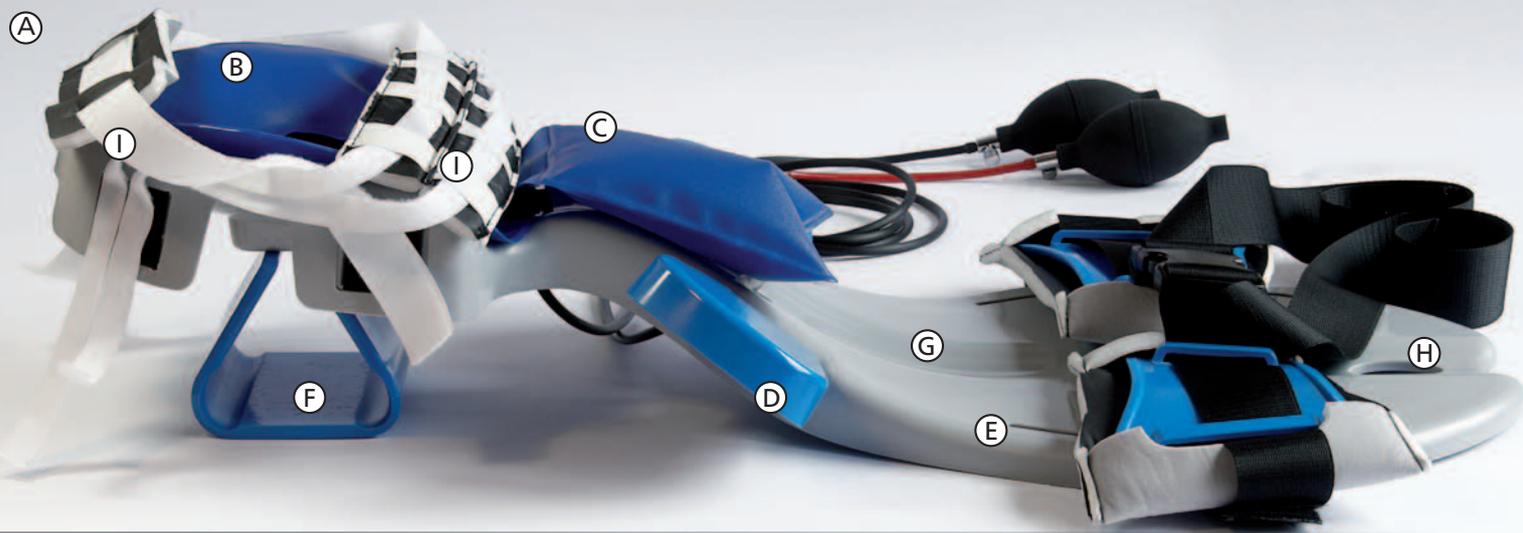

Simplicité d'utilisation.

Légende

- A. Gouttière BEACH-CHAIR+
- B. Coussin gonflable pour la tête (tuyau noir)
- C. Coussin gonflable pour le cou (tuyau rouge)
- D. Supports latéraux amovibles
- E. Support thoraciques avec angles
- F. Support pour tête
- G. Canal pour colonne vertébrale
- H. Anneau de suspension de la gouttière BEACH-CHAIR+
- I. Sangles à usage unique pour l'immobilisation du menton et du front
Housse de glissement (non représenté)

La gouttière BEACH-CHAIR+ est en **matière plastique spéciale**, radio transparente, ne contenant ni métal ni latex.

La gouttière a deux **supports latéraux amovibles pour les épaules**.

Deux **coussins gonflables** soutiennent le cou et la tête du patient, qui sont immobilisés à l'aide de deux sangles.

En cas d'utilisation de la gouttière BEACH-CHAIR+ sur une **table d'opération normale**, la tête est sécurisée en position haute à l'aide d'un « bloc d'appui ».

Sangles réglables bilatérales



La stabilité du thorax est augmentée par deux **supports thoraciques** et une sangle de sécurité.


Sangles d'immobilisation du menton et du front



Supports latéraux réglables pour la chirurgie de l'épaule



Bloc de support pour table d'opération ordinaire

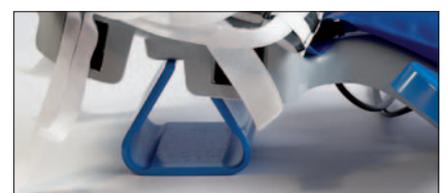

La gouttière BEACH-CHAIR+ peut également être utilisée pour des opérations sans positionnement Beach-Chair, par exemple, en cas de :


- Goitre
- Chirurgie bucco-maxillaire
- Chirurgie faciale
- Carotide
- éventuellement neurochirurgie





Utilisation multifonction.


Les problèmes, nous les connaissons - Maintenant nous avons la solution.

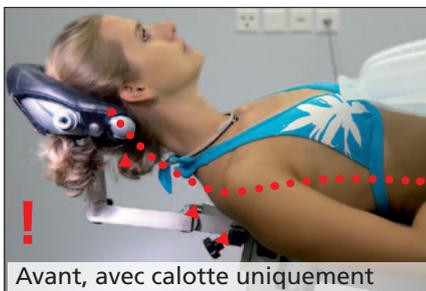

Avant, avec calotte uniquement



Aujourd'hui, avec la gouttière BC+

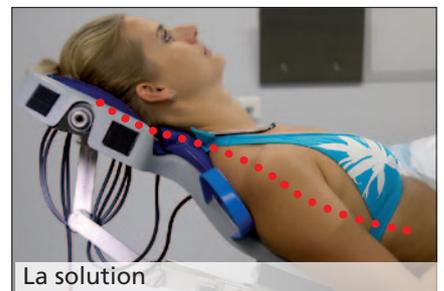

La solution


Le problème chez les patients :

Une fois sous anesthésie, la musculature se relâche et la colonne vertébrale s'affaisse. La calotte crée des points de pression derrière la tête et le contact du dos avec des objets métalliques expose le patient à un risque élevé de brûlures.

Après de longues heures passées sur la table d'opération, les patients se plaignent souvent de fortes douleurs au niveau du cou, de la nuque et de la tête, qui sont généralement dues à leur position inconfortable par manque de soutien au niveau du cou et de la nuque.

La gouttière BEACH-CHAIR+ protège contre tout contact métallique, facilite l'installation du patient et supprime les points de pression à l'arrière de la tête.

La gouttière BEACH-CHAIR+ a été spécialement conçue pour la calotte. Le modèle peut également être utilisée avec un « casque ».

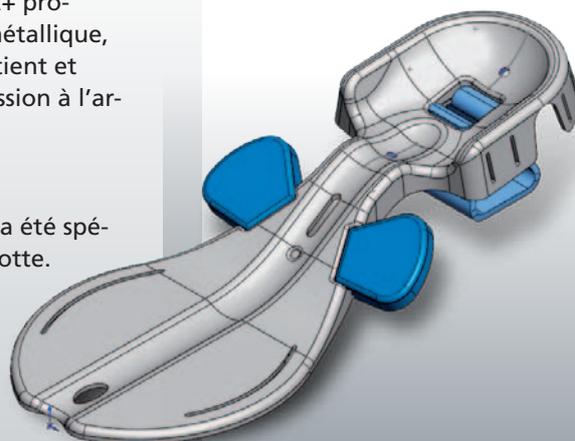

La gouttière BEACH-CHAIR+ apporte une solution aux problèmes liés au positionnement du patient par le personnel médical du bloc opératoire.

La gouttière BEACH-CHAIR+ comble le vide entre la table d'opération et la calotte en évitant des risques inutiles.

La gouttière BEACH-CHAIR+ est une invention révolutionnaire offrant de nombreuses fonctionnalités ; elle est simple à utiliser et sûre pour le personnel soignant et les anesthésistes et confortable pour les patients.



Pour un hôpital, la responsabilité civile n'est pas juste un problème financier.

Et il est clair que Beach-Chair peut éviter beaucoup de problèmes au moment de l'intubation ou dus à un mauvais positionnement. Ces incidents portent préjudice à l'image d'un hôpital, souvent non sans conséquences. Aucun hôpital ne peut ni ne veut prendre pareil risque.

Consommables

Contenu du kit (produits à usage unique)

① Coussin pour le front, ② Coussin pour le menton, ③ 2 Coussin pour le thorax, ④ Bandes velcro 2 coussins pour le front et le menton (multi-usages), housse de glissement (PE)

Carton de 10 pièces

N° du modèle 420.0010

Carton de 50 pièces

N° du modèle 420.0050

Carton de 100 pièces


N° du modèle 420.0100

Coussin de positionnement

N° du modèle 420.2040


Protection pour le visage (en option)

N° du modèle 420.2020

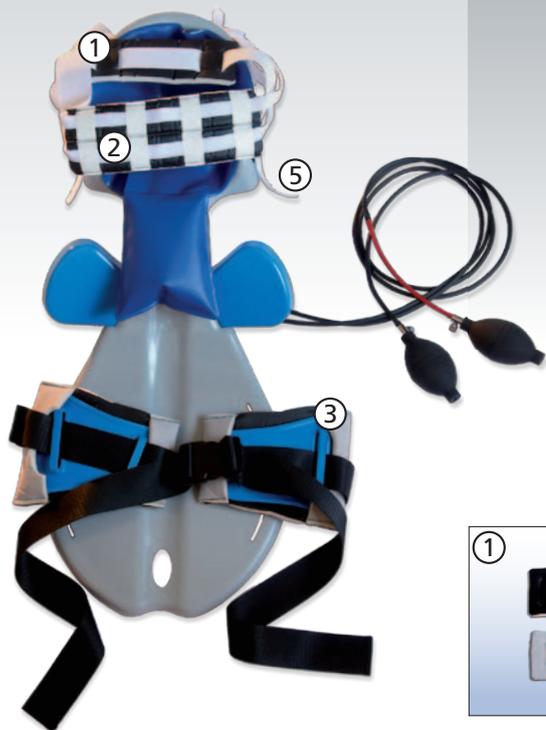

Gouttière BEACH-CHAIR+
(comprend 5 jeux de consommables)

Réf. du modèle 420.2000

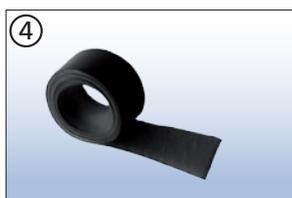

Coussin de positionnement

Protection pour le visage
(en option)

www.samarit.com

Demandez aussi les brochures des autres produits SAMARIT !



Two point fixation



Rollbord™



Blue Transfer Board



TRANSGLIDE

Téléchargez sur notre site une brochure dans votre langue ou adressez-vous à votre distributeur local.

SAMARIT
improving patient care

Samarit Medical AG

Grundstrasse 14 / PO Box 213

CH-8126 Zumikon, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com